

Меры предосторожности

Условия эксплуатации массажного пояса RestArt MP-143

- Не используйте во влажных и пыльных помещениях;
- Не используйте при окружающей температуре выше 40°C;
- Не помещайте прибор на батарею, электроплиту и под воздействие прямых солнечных лучей;
- Прибор предназначен для домашнего применения, а не для коммерческого использования.

Внимание!

Если Вы храните прибор в холодном помещении и заносите в более теплое для использования, дайте поясу согреться в течение часа. Капли конденсата на электронных частях прибора могут вызвать неполадки в его работе.

Обратите внимание!

Перед использованием массажного пояса необходимо проконсультироваться с врачом в следующих случаях:

- при плохом самочувствии или в процессе лечения;
- при злокачественных заболеваниях;
- при заболеваниях сердца;
- во время беременности и во время критических дней;
- если в процессе лечения вам назначен покой или перерыв в нагрузках;
- если имеются заболевания позвоночника или последствия перенесенных травм позвоночника;
- если имеются проблемы со спиной;
- при высокой температуре.

Меры безопасности

- Не пользуйтесь прибором, не прочитав инструкции;
- Не пользуйтесь прибором одновременно с другим лечебным оборудованием или с электроприборами, такими как одеяло с электроподогревом и т. д. во избежание травм;
- Не применяйте менее, чем за час до еды и сразу же после еды;

Уход и хранение

1. Перед тем, как почистить пояс, убедитесь в том, что вилка выдернута из розетки электропитания;
2. Не используйте для чистки пояса бензин, растворители и другие агрессивные жидкости;
3. Применяйте для чистки пояса влажную ткань;
4. Конструкция массажного пояса не предусматривает его обслуживания и смазывания;
5. Если Вы не используете пояс в течение долгого времени, храните адаптер в пыле- и влагонепроницаемом месте;
6. Не держите пояс под прямым действием солнечных лучей в течение длительного времени.



Технические характеристики

Массажный пояс для похудения RestArt MP-143	Характеристики
Артикул	LDM-0361A
Напряжение, В	220
Мощность, Вт	36
Размер упаковки, мм	475*165*115
Вес нетто/Вес брутто, кг	1,9/2,15

Способ применения массажного пояса

1. Возьмите массажный пояс и наденьте его на выбранную часть тела. Отрегулируйте плотность прилегания пояса к телу таким образом, чтобы Вам было комфортно;
2. Нажмите кнопку «Пуск/Стоп» и начните массаж в автоматическом режиме.
3. Интенсивность массажа будет автоматически меняться от высокой к низкой, в пределах пяти различных уровней интенсивности;
4. Нажимайте кнопки «**+**» или «**-**» для регулировки скорости. Вы можете выбрать одну из 4-х программ скорости для автоматического режима и 5-ти программ скорости для ручного режима;
5. Нажмите кнопку «**⋈**» для изменения направления вибрации. Рекомендуется менять направление вибрации каждые пять минут;
6. Для остановки работы массажного пояса нажмите кнопку «Пуск/Стоп»;
7. Если устройство не используется, после выключения отсоедините адаптер от источника питания.

Перевод кнопок:

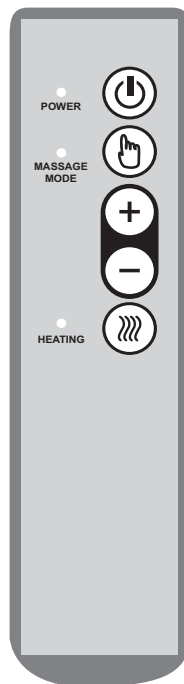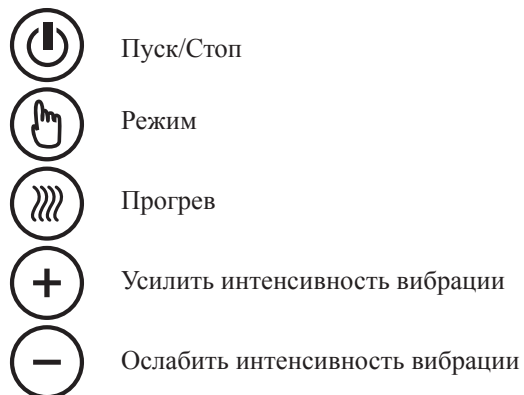

- Если прибор используется детьми младше 12 лет или в непосредственной близости от них или используется недееспособными людьми, то необходимо наблюдение и контроль взрослых над ними;
- При использовании прибор необходимо надежно закреплять на теле;
- При повышенной чувствительности применяйте прибор с осторожностью;
- Не ложитесь при надетом поясе и не ставьте на него тяжелые предметы. Это может вызвать нарушение в его работе;
- Не применяйте на влажное тело;
- Не беритесь за прибор влажными руками;
- Не рекомендуется проводить сеанс одного и того же участка более 10 минут;
- При малейшем дискомфорте во время использования остановите прибор;
- Держите прибор вдали от горячих поверхностей;
- При слишком длительной работе прибора срабатывает автоматическая защита от перегрева, и прибор останавливается самостоятельно. Подождите 20 минут перед дальнейшим использованием прибора.

Внимание!

Рекомендуется начинать массаж с низкой скорости и затем постепенно увеличивать ее.

Массаж при низкой скорости улучшает кровообращение, в то время как массаж при высокой скорости укрепляет большие группы мышц, такие как мышцы спины и четырехглавая мышца.

Время воздействия данным поясом на каждую область - 10 минут.

Когда прибор выключен, следите, чтобы вилка была выдернута из розетки электропитания.

Эффект от использования массажного пояса RestArt MP-143

Благодаря новому двустороннему вибрационному механизму, пояс для похудения RestArt может напрямую воздействовать на область живота, поясницу, ягодицы, бедра, икры и руки посредством двустороннего вибрационного механизма нового образца.

Мощный мотор напрямую массирует тело, проникая в глубокие слои тканей и жировых прослоек.

- Если Вы нацелены на похудение, то в сочетании с подходящей диетой этот прибор поможет Вам восстановить фигуру, так как является хорошим средством для сжигания излишнего жира и снижения веса;
- Вибрационный массаж поможет привести в тонус весь организм;
- С помощью массажного пояса Вы сможете получать необходимый массаж дома и снять усталость в конце рабочего дня;
- Благодаря различным режимам скорости и интенсивности регулирует процесс пищеварения. Вы можете выбрать режим, наиболее подходящий для Вас;
- Улучшает кровообращение в массируемых областях и снимает мышечную усталость.



4

Наименование частей пояса и комплектация

В комплектацию массажного пояса RestArt MP-143 входят:

1. Массажный пояс с пультом управления – 1 шт.
2. Адаптер (24В 2,5А) - 1 шт.
3. Инструкция по применению - 1 шт.
4. Дополнительная лента 50 см - 1 шт.
5. Сумка для удобной транспортировки пояса – 1 шт.



5