

Заботьтесь о здоровье Вашей спины с массажерами RestArt

Массажная подушка P-2008

- Разминает мышцы
- Нормализует кровообращение
- Снимает ощущение скованности и усталости



Массажная накидка N-078


- Обеспечивает полный массаж всей спины и ягодичных мышц
- Разминает затекшие мышцы
- Делает мышцы более эластичными
- Обладает функцией прогрева



Путешествуйте с комфортом с массажерами RestArt

uAuto

- Поддерживает голову и шею в физиологически правильном положении
- Нормализует кровообращение и устраняет ощущение скованности
- Принимает форму Вашего тела

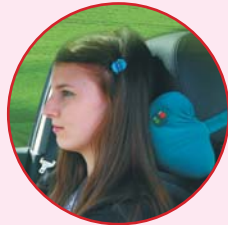

uNeck

- Делает массаж шеи
- Охватывает шею со всех сторон
- Идеальная для дальней поездки
- Обеспечивает комфортный сон в любых условиях



Делай свою жизнь здоровой и красивой каждый день!

Поздравляем!

Купив массажер для лица uFace, Вы подтвердили, что заботитесь о своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. После прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Выполнение и соблюдение рекомендаций, указанных в Инструкции, позволит Вам наслаждаться массажем в течение длительного времени.

Содержание:

Меры предосторожности	2
Несколько слов о массаже лица	2
О массажере uFace	3
Режимы	3
Способ применения	3
Схема устройства массажера	4
Уход за силиконовым роликом	4
Установка силиконового ролика	5
Установка батареек	6
Технические характеристики	6

Примечание:

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения к ней в дальнейшем.

Меры предосторожности

- Не массируйте одно и то же место слишком долго;
- Не надавливайте на кожу слишком сильно;
- Не используйте массажер, не сняв контактные линзы;
- Избегайте попадания жидкости на прибор. Если массажер намоч, немедленно отключите его;
- Храните массажер в сухом месте, недоступном для детей. Избегайте высоких температур, попадания солнечных лучей и влажности;
- Не заменяйте части механизма прибора самостоятельно. Проконсультируйтесь с профессионалом в случае необходимости;
- Если Вы не собираетесь использовать массажер в течении длительного времени, рекомендуется вытащить батарейки и сохранить в разобранном виде;
- Противопоказано использование массажера детям;
- Не выкидывайте старые батарейки в огонь.

Несколько слов о массаже лица

Красота и здоровье кожи лица – один из важнейших показателей красоты женского тела. Каждая девушка и женщина хочет, чтобы ее кожа была подтянутой, свежей и упругой. Однако возраст влияет и на состояние кожи. Она стареет, появляются морщины и темные круги под глазами. Поэтому многие женщины обращаются в салоны красоты, чтобы вернуть коже былую молодость и красоту. В перечне различных процедур по уходу за лицом массаж играет очень важную роль.

Массаж лица увеличивает эластичность кожи, замедляя процесс появления морщин, стимулирует микроциркуляцию кожных покровов, ускоряет процессы метаболизма, сужает поры и потовые железы. Массаж помогает сохранить кожу чистой и здоровой, расслабить мышцы и насытить клетки кислородом.

Самое важное в уходе за кожей лица – систематичность и регулярность. Разовых посещений салона явно недостаточно для того, чтобы кожа все время была здоровой и молодой.

Массажер uFace создан специально для того, чтобы Вы могли делать профессиональный массаж кожи лица так часто, как это Вам необходимо и в домашних условиях.

Предлагаем Вашему вниманию широкий ассортимент массажеров для заботы о красоте и здоровье

Заботьтесь о красоте Вашего лица с массажерами RestArt

uEye

- Подходит для массажа нежной кожи вокруг глаз;
- Содержит Германий;
- Разглаживает морщины, убирает пигментные пятна, усиливает кровоснабжение и улучшает питание клеток



uSonic

- Проводит тразвуковую и фототерапию
- Очищает поры
- Заставляет Ваше косметическое средство проникать в глубокие слои кожи и давать действительно хороший результат.



Заботьтесь о красоте Вашего тела с массажерами RestArt

EasyTone

- Борется с целлюлитом
- «Разбивает» жировые отложения и способствует их выведению
- Расслабляет мышцы



Пояс для похудения RestArt MP-142

- Тренирует мышцы
- Сжигает жиры
- Подтягивает кожу



Поверните винт против часовой стрелки до щелчка (Рис. 1).




Рисунок 1

Установка батареек


1. Прибор работает на батарейках AAA*1,5V. Рекомендуется вовремя менять батарейки для обеспечения корректной работы прибора.
2. Замена батареек:
 - Придерживая одной рукой рукоятку массажера, другой с силой сдвиньте крышку отсека для батареек;



- Извлеките старые батарейки и замените на новые. Обратите внимание на полярность батареек, во избежание неправильной работы массажера;

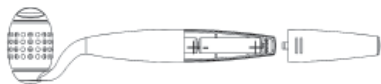

- Установите крышечку с батарейками в горизонтальное положение, и по направляющим закройте ее до щелчка.

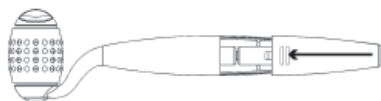

Технические характеристики

Роликовый массажер uFace	Характеристики
Вес нетто, гр	120
Вес в упаковке, гр	140
Размеры массажера, мм	89*214*42

О массажере uFace

В состав массажера uFace входит Германий. При контакте с кожей он начинает выделять отрицательно заряженные ионы, которые борются с процессами старения, негативным влиянием окружающей среды, улучшают обменные и регенерирующие процессы.

Массажер uFace:

1. Стимулирует микроциркуляцию крови;
2. Активизирует кожный метаболизм, наполняя кожу энергией и омолаживая ее;
3. Делает кожу более эластичной и упругой;
4. Разглаживает морщины, предотвращает их появление;
5. Устраняет темные круги под глазами;
6. Очищает поры от черных точек;
7. Обогащает кожу кислородом.

Режимы

Массажер uFace осуществляет 6 режимов массажа. Он оснащен таймером на 20 минут работы. Массажный силиконовый ролик имеет «бугристую» поверхность для более глубокого массажа.

Режимы:

Режим А: Мягкий массаж;

Режим В: Интенсивный массаж;

Режим С: Интенсивный массаж с вибрацией, 70 микроимпульсов в минуту;

Режим D: Комбинированный массаж режимов А и В, 60 микроимпульсов в минуту;

Режим Е: Соединение режимов А, В, С и D, по 3 секунды на каждый режим, около 12 секунд на цикл;

Режим F: Соединение режимов А, В, С и D, по 45 секунды на каждый режим, около 3 минут и 45 секунд на цикл.

Способ применения

- Очистите и насухо вытрите лицо перед началом массажа;
- Установите батарейки. Нажмите кнопку вкл./выкл., чтобы включить массажер

и начать Режим А. Приложите устройство к участку, который Вы желаете массировать, и плавно проводите прибором верх и вниз;

- Не рекомендуется надолго задерживать массажер на одном и том же месте. Скользите вверх и вниз, нажимая на устройство с разной интенсивностью на разных участках;
- Если Вы носите контактные линзы, не забудьте снять их перед началом массажа;
- Нажмите кнопку вкл./выкл. повторно, чтобы перейти к режиму Б. Дальнейшие нажатия этой кнопки будут последовательно менять режимы в порядке, указанном выше;
- Седьмое нажатие кнопки вкл./выкл. отключит прибор;
- Время массажа по умолчанию – 20 минут. По истечении этого срока массажер автоматически отключается. Если вы хотите продолжить массаж нажмите на кнопку вкл./выкл. еще раз;
- Массаж длится 20 минут, но если за это время меняется программа, то отсчет времени начинается заново;
- Рекомендованное время использования: 2-3 раза в день, по 20 минут

Схема устройства массажера



Уход за силиконовым роликом

1. При ежедневном использовании силиконовый ролик загрязняется. Поэтому периодически необходимо выключать массажер и проводить чистку ролика;
2. Вы можете использовать нейтральные чистящие средства. Не рекомендуется использовать такие токсичные и агрессивные вещества как бензин и спирт;
3. После чистки высушите массажер, избегая попадания солнечного света;

4. Для очистки ролика действуйте следующим образом:

- Когда винт зафиксирован (Рис. 1), поверните его против часовой стрелки (Рис. 2) и снимите его (Рис. 3);

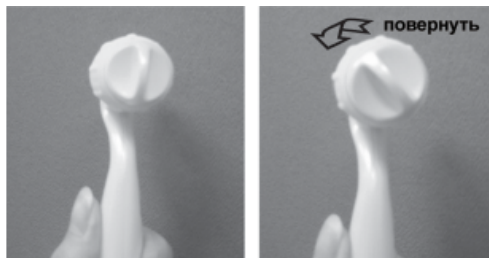


Рисунок 1

Рисунок 2

Фиксирующий паз Винт с фиксатором

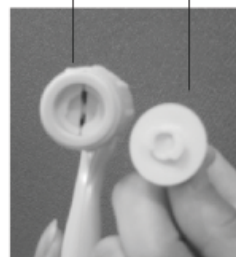


Рисунок 3

- После того, как Вы снимите винт, вытащите силиконовый ролик;
- Положите ролик в воду и хорошо очистите его от грязи и пыли;
- После чистки хорошо просушите ролик, избегая попадания солнечных лучей.

Установка силиконового ролика

Установите пластиковый ролик (вместе с силиконовым роликом) в разъем для ролика и вставьте винт (Рис. 3) в фиксирующий паз в ролике. (Рис. 2).



Рисунок 2



Рисунок 3