

YAMAGUCHI



массажер для шеи
Аxiom NECK

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Ознакомиться с продукцией
компании Yamaguchi можно на
сайте www.yamaguchi.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые особенности.....	4
Меры предосторожности.....	5
Описание деталей.....	6
Описание панели управления.....	7
Перед первым использованием.....	8
Использование.....	8
Описание режимов работы.....	9
Выключение.....	9
Устранение неполадок.....	9
Хранение и уход.....	10
Технические характеристики.....	10

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Разминающий роликовый массаж шеи
- Четырехроликовый массажный механизм
- Механическая регулировка положения роликов по ширине
- 4 режима массажа
- Выбор длительности сеанса массажа – 5/10/15 минут
- Мягкий прогрев
- Инфракрасное излучение усиливает иммунитет человека и несет в себе общеукрепляющий эффект
- Магнитотерапия благотворно влияет на сон и эмоциональное напряжение
- Снятие усталости и стресса
- Нормализация кровообращения
- Массажер работает от аккумулятора, что позволяет всегда брать его с собой и использовать дома, в офисе или на отдыхе

Показания к применению:

- усталость и напряжение в мышцах шейного отдела
- головные боли и головокружение
- сидячая работа, учеба
- стрессы и бессонница

Комплектность товара:

- массажер x 1
- резиновая ручка x 2
- шнур питания с адаптером x 1
- руководство пользователя x 1
- сумочка для транспортировки x 1
- упаковочная коробка* x 1

* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.


- Сохранность и эффективное использование массажера для шеи возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- До начала массажа проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажер. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться массажером без присмотра со стороны.
- При возникновении какого-либо отклонения (например, при запахе дыма, подозрительном шуме и т.д.) немедленно прекратите использование устройства!
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! В случае повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.

- Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажера.
- Не используйте массажер в лечебных целях.
- Запрещено использовать массажер во время вождения автомобиля.
- Не используйте массажер в местах повышенной влажности и высоких температур.


При наличии одного из следующих условий проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при разрывах мышц шейного отдела, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при высоком давлении;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

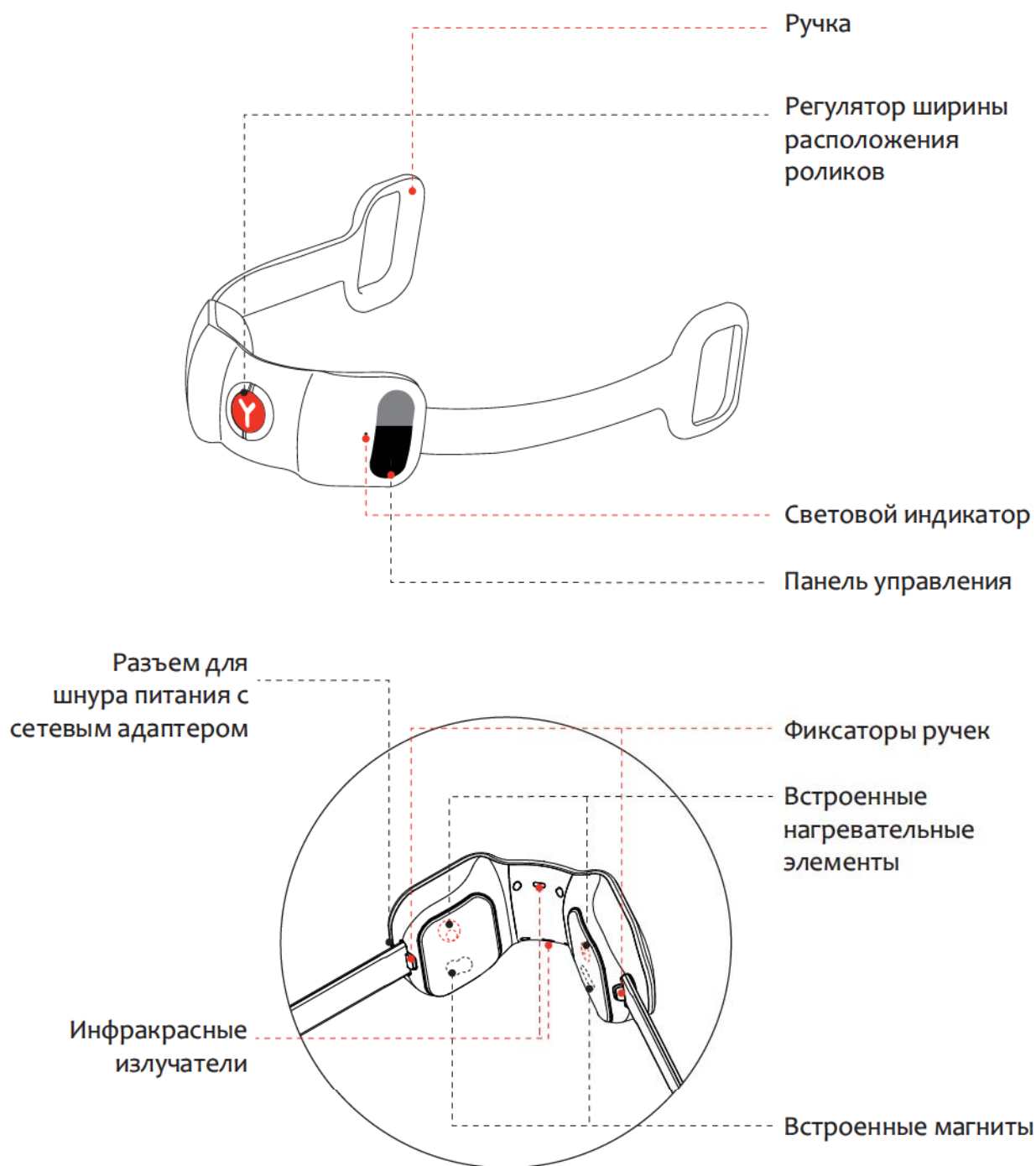

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

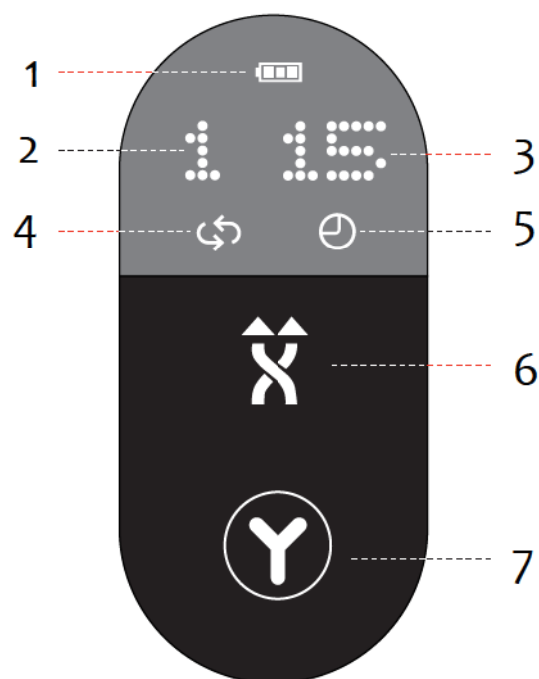

1. Индикатор заряда батареи
2. Индикатор режима массажа (1, 2, 3, 4)
3. Индикатор длительности массажа (5, 10, 15 минут)
4. Иконка отображения смены направления вращения массажных роликов
5. Иконка отображения длительности сеанса массажа
6. Кнопка выбора режима массажа
7. Кнопка включения/выключения; кнопка выбора длительности массажа

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор массажера.

- Подключите сетевой шнур с адаптером к соответствующему разъему на корпусе массажера.
- Подключите шнур к сети 220В.
- Начнется зарядка массажера, при этом световой индикатор на корпусе загорится красным цветом. Индикатор батареи на панели управления отобразит процесс зарядки.

Внимание! Во время зарядки массажер не работает. Время зарядки 5-6 часов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

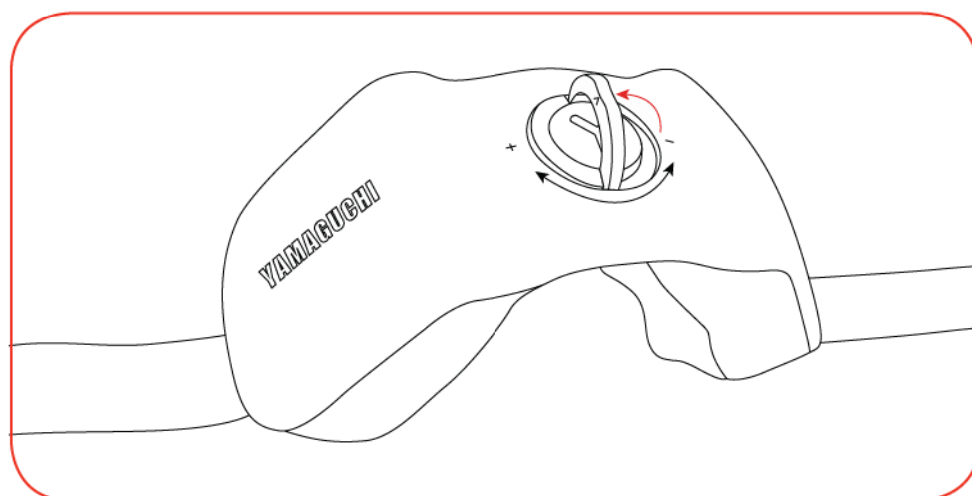- Вставьте резиновые ручки в соответствующие разъемы по бокам массажера.
- Перед началом массажа Вы можете отрегулировать положение роликов для максимального комфорта. Для этого ногтем указательного пальца подденьте круглый регулятор в месте индикатора стрелочки **V** и поднимите его вверх. Далее вращайте его по часовой стрелке до достижения желаемой ширины расположения роликов. Максимальная зона вращения - 180 градусов (от - до +).



- Расположите массажер на шее.
- Нажмите на кнопку включения. После звукового сигнала массажер начнет работать. Световой индикатор загорится красным цветом.


Примечание. По умолчанию установлены первый режим работы и время работы массажера - 15 минут.

- Повторно нажимайте на кнопку  для выбора нужного режима работы. На панели управления будет отображаться цифровой индикатор выбранного режима.
- Повторно нажимайте на кнопку  для выбора длительности сеанса массажа - 5/10/15 минут.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Режим массажа	Описание
1 режим	<ul style="list-style-type: none">Ролики с одной стороны вращаются по часовой стрелке, ролики с другой стороны вращаются против часовой стрелки
2 режим	<ul style="list-style-type: none">Ролики с одной стороны вращаются против часовой стрелки, ролики с другой стороны вращаются по часовой стрелке
3 режим	<ul style="list-style-type: none">Ролики с одной и с другой стороны вращаются по часовой стрелке
4 режим	<ul style="list-style-type: none">Ролики с одной и с другой стороны вращаются против часовой стрелки

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- В конце сеанса после трех звуковых сигналов массажер выключится.
- Для немедленного выключения нажмите и удержите кнопку .

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время работы массажера слышен шум	Шум вызван работой механизмов внутри массажера	Это нормальное явление, шум не является неисправностью массажера
Массажер не работает	Массажер не включен	Включите массажер, нажав на кнопку Y на панели управления
	Аккумулятор разрядился	Необходимо зарядить аккумулятор
Внезапное прекращение работы	Сработал автоматический таймер отключения	Выберите режим массажа

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение

- Поместите массажер в упаковку.
- Храните массажер в сухом и прохладном, хорошо вентилируемом месте.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить внутреннюю ткань массажера.

Уход

- Очищайте корпус массажера мягкой, слегка влажной тканью.
- Во время чистки изделия не погружайте массажер в воду или другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Массажер для шеи
Модель	YAMAGUCHI Axiom NECK
Мощность	5 Вт
Напряжение	5 В 1А
Таймер	5/10/15 минут
Габариты (ДхШхВ)	220×95×120 мм
Вес	0,855 кг



YAMAGUCHI®
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD.